

POSTUP LÉKAŘE KE SPRÁVNÉMU OBJEDNÁNÍ GENETICKÉ ANALÝZY

GHC GENETICS s.r.o., KRAKOVSKÁ 8/581, 110 00 PRAHA 1

ELEKTRONICKY
www.ghcgenetics.cz

nebo

TELEFONICKY
na čísle: 234 280 280



1. PŘIHLÁŠENÍ lékaře:

Registračním číslem a heslem, které lékař obdrží poštou na vyžádání v GHC Genetics, nebo osobně od reprezentanta. Do kolonky e-mail vyplní své registrační číslo, do kolonky heslo vyplní své heslo.



2. REGISTRACE lékaře:

Proběhne řádným vyplněním a odesláním všech tučně označených údajů. K budoucím kontaktům (objednávkám) elektronickou cestou bude lékař používat pouze PŘIHLÁŠENÍ. (viz. bod číslo 1)



3. Úplné vyplnění objednávky včetně všech povinných údajů o klientovi(ce).

Potvrzení objednávky je obratem zasláno lékaři na zadaný e-mail. Obsahuje údaje pro klientovu úhradu požadované částky včetně variabilního symbolu. Variabilní symbol pro platbu je část čísla objednávky, které je za pomlčkou!

Příklad:

č. obj. 0075 - (870555)

Všechny své objednávky nalezne lékař v internetovém systému (Přehled objednávek).

4. K odběru vzorku DNA se přistupuje až po uhrazení částky v uvedené e-mailové objednávce. Kopii potvrzení o provedené úhradě klient(ka) předkládá lékaři před odběrem vzorku.



5. Platbu klienta(ky) může lékař uskutečnit i přímo ze své ordinace prostřednictvím embosované platební karty klienta(ky).

Doporučujeme
tento způsob úhrady



6. Lékař provede odběr 3 speciálními stěrovými tampóny, které jsou určeny pro odběr DNA z bukalní sliznice, a to podle „Návodu ke správnému odběru primárního vzorku.“ (viz 2.str. tohoto materiálu)



7. Klient(ka) podepíše formuláře, bez kterých není laboratoř oprávněna analýzu provádět:

- Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních a citlivých údajů
- Informovaný souhlas klienta s vyšetřením souboru genů pro genetickou analýzu.

Nepovinné je vyplňování dotazníku rodinné a osobní anamnézy.



8. Podepsané formuláře spolu s odebraným vzorkem zašle lékař doporučeně ke zpracování do laboratoři pouze pod objednávkovým číslem. Adresa: GHC Genetics s.r.o. Krakovská 8/581 110 00 Praha 1



Skladování odebraného vzorku a opakování odběru:

Odebraný vzorek se nesmí skladovat déle než 14 dnů po odebrání a po tuto dobu se skladuje do teploty 20°C. V případě, že ze vzorku DNA nebude možno pro jeho nízkou kvalitu provést analýzu, bude lékař kontaktován pro náhradní odběr.

Dnem přijetí v laboratořích GHC Genetics začíná lhůta pro zpracování a následné vydání závěrečné genetické zprávy.

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,

pro úspěšné provedení prediktivního genetického testu z laboratoří GHC Genetics je nezbytné provedení důkladného stěru tampónem z ústní sliznice tak, aby pro analýzu bylo získáno dostatečné množství vzorku DNA. Proto prosím věnujte velkou pozornost následujícímu postupu. Níže uvedené pokyny vám budou nápomocny při správném odběru. Součástí zasláního setu je:

- Informovaný souhlas klienta(ky) s vyšetřením souboru genů pro genetickou analýzu
- Souhlas s poskytnutím a zpracování osobních a citlivých údajů

kteří klient(ka) vyplní, podepíše a jsou zaslány do laboratoří GHC Genetics spolu s odebranými vzorky. Příložený dotazník k osobní a rodinné anamnéze není povinný, nemusíte jej vyplňovat a zasílat zpět. V případě požadavku interpretace výsledné zprávy lékařem GHC Genetics musí být i tento dotazník zaslán spolu s ostatními materiály.


POSTUP STĚRU:

Načasování, množství:

Minimálně 60 min., optimálně 120 min. před odběrem nesmí klient(ka) jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku, cucat bonbony apod., výjimkou je konzumace pouze neslazené nesycené vody.


Před odebráním vzorku si musí osoba provádějící odběr umýt ruce. Klient(ka) si důkladně vypláchne ústa čistou neperlivou vodou a polkne případný zbytek slin (a to i opakovaně mezi jednotlivými výtěry). Doporučujeme, aby klient(ka) neměl(a) při odběru infekční či virové onemocnění, které by mohlo ovlivnit kvalitu její DNA.

- Bezprostředně před odběrem vzorku, opatrně vyjměte stěrovou tyčinku ze zkumavky.
- Štětičkou důkladně otírejte vnitřní strany tváří a záhybů mezi dásněmi pohybem dopředu a dozadu (jako při čištění zubů) a zároveň štětičkou otáčejte, aby byla využita celá její plocha (viz obr. 1). Optimální intenzita stěru je, pokud uvnitř tváře klient(ka) pociťuje mírný tlak. Každou štětičkou otírejte sliznici tváří přibližně po dobu 1 minuty.
- Pokud se klientovi(ce) v průběhu stěru tvoří sliny, je nutné aby polkl(a) (setřít sliny štětičkou je nežádoucí!).
- Postup opakujte se všemi stěrovými tyčinkami.**

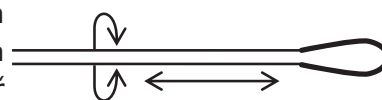

Obrázek 1 - pohyb štětičkou v ústech

- Po odběru umístěte stěrovou tyčinku do sklenice štětičkou nahoru a nechte cca 30 minut vyschnout při pokojové teplotě. **Štětička odběrové tyčinky nesmí za žádných okolností přijít do styku s ničím jiným než se sliznicí, z níž se vzorek odebírá!!!**
- Po zaschnutí štětiček stěrové tyčinky (tj. po 30 minutách) nasuňte jednotlivé zkumavky na tyčinky ve sklenici (viz obr. 2). Dbejte, aby zkumavky byly těsně uzavřeny. Zkumavky vložte do uzavíratelného sáčku, dále pak společně s podepsanými formuláři vložte do obálky a odešlete DOPORUČENĚ na naši adresu. Zkumavky vždy uchovávejte při teplotě do 20 °C, nemrazte je, ani nekládejte do lednice.
- Zkumavky stěrových tyčinek jsou opatřeny štítky. Na každý štítek před provedením stěru DNA doplňte:

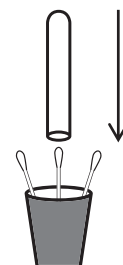

Obrázek 2 - nasunutí zkumavek na tyčinky

1. celé číslo objednávky (do kolonky Name/Nom/Nome, př. 0000 - 000000)

2. datum provedení stěru (do kolonky Date/Data)

Popis štítku provádějte nesmyvatelným fixem (na vyžádání dodáme prostřednictvím reprezentanta GHC Genetics nebo poštou)

Poznámka:

Sliznice v ústech, **ze které je nutné získat vzorek pro analýzu**, je vlhká načervenalá tkáň, která vystylá dutinu ústní a nachází se mezi horní a dolní čelistí, po obou stranách. Stěr je proto podobný čištění zubů s tím rozdílem, že štětičkou je nutné otáčet i dokola.

Součástí balení: dotazník, 2x informovaný souhlas, návod, uzavíratelný sáček, zpětná obálka, 3x stěrová tyčinka.